

Καλώς ήρθατε στο **Kaiku Health**, τον ψηφιακό σας σύντροφο φροντίδας!

Το Kaiku Health είναι μία ψηφιακή υπηρεσία που βοηθάει στην ενημέρωση της ομάδας φροντίδας σας για την πορεία σας, όσον αφορά στη φροντίδα του καρκίνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health από τον υπολογιστή σας, το smartphone ή το tablet, ανά πάσα στιγμή, όπου και εάν βρίσκεστε.

Το Kaiku Health δίνει σε εσάς και στην ομάδα φροντίδας σας μία εικόνα των συμπτωμάτων και των αλλαγών ευεξίας, που μπορεί να νιώθετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου..^{1,2,3,4}

¹ Basch E et al., Journal of Clinical Oncology 34.6 (Feb. 2016), pp. 557–565.

² Absolom K et al., BMC Cancer 17.1 (May 2017), p. 318.

³ Denis F et al., J. Natl. Cancer Inst. 109.9 (Sept. 2017).

⁴ Warrington L et al., J Med Internet Res 21 (1 2019), e10875



1. Χρήση του Kaiku Health

Ένα μέλος της ομάδας φροντίδας σας θα σας καλέσει να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health. Θα λάβετε μία πρόσκληση μέσω email , η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Ίσως να έχετε λάβει έναν σύνδεσμο από την ομάδα φροντίδας σας, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε απευθείας στο Kaiku Health, χωρίς πρόσκληση μέσω email.

Κατά την εγγραφή σας, ίσως σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό επαλήθευσης, ο οποίος θα σταλεί στον τηλεφωνικό σας αριθμό με μήνυμα κειμένου ή με αυτοματοποιημένη φωνητική κλήση.

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα και ημερομηνία γέννησης. Θα πρέπει, επίσης, να ορίσετε έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας. Μετά από αυτό, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη (συνήθως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Kaiku Health.⁵ Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το βιομετρικό σύστημα σύνδεσης (με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή προσώπου), εάν αυτό υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

⁵ For patients in Finland, Kaiku Health also supports log in via banking credentials or mobile identity (mobiilivarmenne).

2. Εργασίες και ερωτηματολόγια

Μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω της υπηρεσίας, όταν θα έχετε νέα καθήκοντα προς διεκπεραίωση, όπως συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Αυτά τα καθήκοντα ανατίθενται σε εσάς από την ομάδα φροντίδας σας.

Οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται σε εσάς είτε μέσω email είτε ως ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στη σελίδα "Οι πληροφορίες μου" στον λογαριασμό σας.

Ερωτηματολόγια 1

Ο/Η **Dean Doctor** θα ήθελε να κάνετε τα ακόλουθα πράγματα σήμερα:



Ερωτηματολόγιο σχετικά με την ποιότητα ζωής (QLQ-C30)

Ενδιαφερόμαστε για ορισμένες πληροφορίες που αφορούν εσάς και την υγεία σας. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις εσείς ο(η) ίδιος(α) επιλέγοντας την απάντηση που εφαρμόζεται καλύτερα στην περίπτωση σας. Δεν υπάρχουν «σωστές» και «λάθος» απαντήσεις. Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικές.

[Συμπλήρωση ερωτηματολογίου](#)

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αρκούν μόνο μερικά λεπτά. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση και να συνεχίσετε αργότερα ολοκληρώνοντας την. Είναι σημαντικό να συμπληρώνετε αυτά τα ερωτηματολόγια, ακόμα και εάν δεν παρουσιάζετε κάποια συμπτώματα.



Κεφάλι, μάτια και όραση, στόμα και λαιμός
Πονοκέφαλος, βήχας, αλλαγές στη γεύση



Γαστρεντερικά
Ναυτία, έμετος, διάρροια, μειωμένη όρεξη, κοιλιακός πόνος

Σε κάποια από τα ερωτηματολόγια, στην αρχή, θα σας ζητηθεί πρώτα να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών συμπτωμάτων . Οι ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν θα σχετίζονται μόνο με αυτές τις κατηγορίες που θα έχετε επιλέξει. Εάν δεν επιλέξετε καμία κατηγορία συμπτωμάτων, θα ερωτηθείτε για όλα τα συμπτώματα.

3. Σχόλια

Μόλις ολοκληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων, το Kaiku Health μπορεί να σας προσφέρει καθοδήγηση για το πώς μπορείτε να αντιδράσετε σε σχέση με συμπτώματα που παρουσιάζετε. Η ομάδα φροντίδας σας θα μπορεί, επίσης, να δει τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.



Το **Kaiku Health** δεν παρακολουθείται από το κλινικό προσωπικό σε πραγματικό χρόνο, αλλά προορίζεται μόνο για μη επείγουσα επικοινωνία. Σε επείγουσες καταστάσεις, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας σας ή καλέστε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης.



Μετά την ολοκλήρωση των ερωτηματολογίων συμπτωμάτων μπορείτε να λάβετε τρεις διαφορετικούς τύπους σχολίων.

- Το πράσινο σημαίνει ήπια συμπτώματα,
- το κίτρινο σημαίνει μέτρια συμπτώματα και
- το κόκκινο σημαίνει σοβαρά συμπτώματα.

Πόνος στο στήθος



Ο πόνος στο στήθος είναι ένα από τα συμπτώματα της ανοσοθεραπείας που βρίσκονται υπό ειδική παρακολούθηση και πρέπει να αναφέρεται στην ομάδα φροντίδας από νωρίς.

Εάν αισθάνεστε πόνο στο στήθος, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας τηλεφωνικά. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε αμέσως με την ομάδα φροντίδας, ζητήστε να μεταφερθείτε στα επείγοντα περιστατικά.

Αν μεταβείτε στα επείγοντα, πρέπει να θυμηθείτε να ενημερώσετε το κλινικό προσωπικό για τις θεραπείες ανοσοθεραπείας που λαμβάνετε ή έχετε λάβει στο παρελθόν.

Εάν μετά την ολοκλήρωση ενός ερωτηματολογίου, το Kaiku Health σας υποδεικνύει να επικοινωνήσετε με την ομάδα φροντίδας σας και/ή με το τμήμα έκτακτης ανάγκης, κάντε το χωρίς καθυστέρηση.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής εσείς οι ίδιοι

Ο βήχας είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα σε γενικές γραμμές και σε σχέση με ορισμένους τύπους καρκίνου και με τις θεραπείες τους. Ο ήπιος βήχας μπορεί να ανακουφιστεί έως κάποιον βαθμό με αντιβηχικά σιρόπια ή παστίλιες που μπορείτε να προμηθευτείτε από τον φαρμακοποιό σας χωρίς ιατρική συνταγή.

Επικοινωνήστε αμέσως με την ομάδα φροντίδας σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εμφανίζεται αίμα με τον βήχα σας
- Το αίμα στον βήχα σας έχει αυξηθεί
- Ο βήχας χειροτερεύει
- Ο βήχας εμφανίζεται μαζί με δύσπνοια

Στο τμήμα σχολίων του Kaiku Health ενδέχεται να περιλαμβάνονται και οδηγίες προσωπικής φροντίδας για ανακούφιση από τα συμπτώματα στο σπίτι.



Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, η καθοδήγηση και οι οδηγίες προσωπικής φροντίδας που παρέχει το **Kaiku Health**, ενδεχομένως να μην ισχύουν για εσάς. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα σας ή όσον αφορά τα συμπτώματά σας και τη διαχείρισή τους, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας.

Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη μονάδα φροντίδας σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας τηλεφωνικά.

Σχόλια

Εάν

**Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων για ανοσοθεραπεία**

Σχόλια από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε στις 17/3/2021



Θέλετε να δείτε τα σχόλια που έχετε λάβει από το Kaiku Health, μπορείτε να το κάνετε μεταβαίνοντας στο τμήμα "Σχόλια", στην αρχική σελίδα του Kaiku Health.


4. Πίνακας ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου συμπτωμάτων για να παρακολουθείτε την αλλαγή των συμπτωμάτων σας με την πάροδο του χρόνου. Ο πίνακας ελέγχου συμπτωμάτων σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να ξαναδείτε τις οδηγίες προσωπικής φροντίδας που ενδεχομένως έχετε λάβει από το Kaiku Health.

Πίνακας ελέγχου

[Λήψη αναφοράς PDF](#)

Συμπτώματα

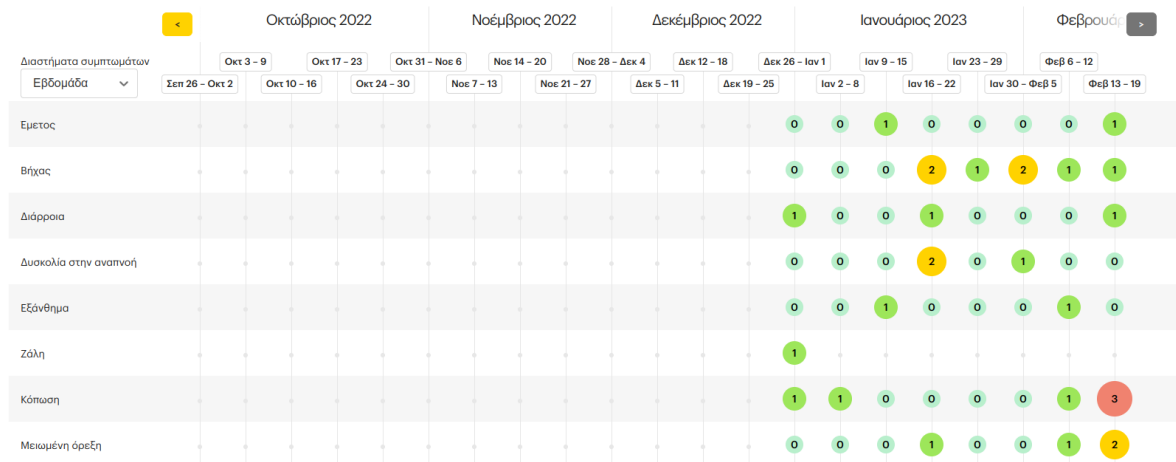

5. Γνώσεις και υποστήριξη

Η ενότητα "Γνώσεις και υποστήριξη" του Kaiku Health σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που αντιμετωπίζετε, τη θεραπεία της και τα συμπτώματα που ενδέχεται να παρουσιάσετε.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το Kaiku Health, τη φροντίδα σας ή τα συμπτώματα που παρουσιάζετε, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας.

6. Επικοινωνία με την ομάδα φροντίδας σας

Η ομάδα φροντίδας σας λαμβάνει αυτόματα τις απαντήσεις σας μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Εάν η κλινική σας έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Συνομιλίες" στο Kaiku Health, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να επικοινωνήσετε με την ομάδα φροντίδας σας.



Το **Kaiku Health** δεν παρακολουθείται από το κλινικό προσωπικό σε πραγματικό χρόνο, αλλά προορίζεται μόνο για μη επείγουσα επικοινωνία. Σε επείγουσες καταστάσεις, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας σας ή καλέστε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη μονάδα φροντίδας σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας τηλεφωνικά.

7. Συχνές ερωτήσεις

7.1. Σε ποιες συσκευές και προγράμματα περιήγησης μπορώ να χρησιμοποιώ το **Kaiku Health**;

Το Kaiku Health είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για smartphone iOS (έκδοση 11.0 και νεότερη) και Android (έκδοση 5.0 και νεότερη). Μπορείτε να το εγκαταστήσετε μέσω του App Store ή του Google Play.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού στον υπολογιστή και στο smartphone. Το Kaiku Health είναι συμβατό με τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης ιστού. Με αυτό ως δεδομένο, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health από τη νεότερη έκδοση των Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, ή Apple Safari.

Η χρήση του Kaiku Health από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση στον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.

7.2. Ποια είναι η προβλεπόμενη χρήση και οι υποδείξεις χρήσης του **Kaiku Health**;

Το Kaiku Health προορίζεται για χρήση στη φροντίδα για τον καρκίνο και στην επακόλουθη μη επείγουσα επικοινωνία μεταξύ ενός ενήλικα ασθενή και ενός επαγγελματία υγείας. Επιπλέον, προβλέπεται για τη συλλογή δεδομένων που αναφέρονται από τον ασθενή, την εμφάνιση και την ανάλυση κλινικών δεδομένων και δεδομένων που αναφέρουν οι ασθενείς, καθώς και για την καθοδήγηση του ασθενή. Τα

δεδομένα που επεξεργάζεται το Kaiku Health προορίζονται για χρήση στην υποστήριξη θεραπευτικών αποφάσεων και για την υποστήριξη διαγνώσεων.

Το Kaiku Health ενδείκνυται για όλες τις ασθένειες του καρκίνου σε όλα τα στάδια της θεραπείας και της μεταπαρακολούθησης.

7.3. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Kaiku Health ως ασθενής;

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health, πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της υπηρεσίας. Αυτή η συγκατάθεση σας ζητείται, συνήθως, κατά την πρώτη σας σύνδεση στο Kaiku Health. Η συγκατάθεσή σας μπορεί, μερικές φορές, να ζητηθεί σε έντυπη μορφή εκτός του Kaiku Health, για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Kaiku Health στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

Ως ασθενής που χρησιμοποιεί το Kaiku Health, πρέπει να βρίσκεστε σε θεραπεία ή σε φάση μεταπαρακολούθησης για κάποιον τύπο καρκίνου.

Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μια συσκευή συμβατή με το Kaiku Health (βλ. "Σε ποιες συσκευές και σε ποια προγράμματα περιήγησης μπορώ να χρησιμοποιώ το Kaiku Health;").

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health μόνο αν εσείς ή κάποιος άλλος που ενεργεί για λογαριασμό σας είστε σωματικά και διανοητικά σε θέση να το πράξετε.

Το Kaiku Health πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα 18 ετών και άνω. Άτομα που είναι άνω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το Kaiku Health, εφόσον η κλινική ομάδα έχει κρίνει ότι είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν.

7.4. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν πρέπει να χρησιμοποιώ το Kaiku Health;

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Kaiku Health.
- Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε μια συσκευή συμβατή με το Kaiku Health.
- Εάν είστε απρόθυμοι ή δεν μπορείτε (π.χ. λόγω της νόσου) να συμμορφωθείτε σε σχέση με τις αναφορές που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ασθενείς και σε άλλους τρόπους χρήσης του Kaiku Health.
- Εάν δεν έχετε αρκετή ευχέρεια σε καμία γλώσσα από αυτές που προσφέρονται στο Kaiku Health, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Kaiku Health ή
- εάν είστε κάτω των 15 ετών ή κάτω των 18 ετών και η κλινική ομάδα έχει κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το Kaiku Health.

Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που στέλνετε στην ομάδα φροντίδας μέσω του Kaiku Health να αντικατοπτρίζουν σωστά τα συμπτώματά σας.

Λόγω αυτού, η ομάδα φροντίδας σας δεν πρέπει να σας ενθαρρύνει να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health αν πάσχετε από κάποια σωματική ή διανοητική νόσο που δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Kaiku Health (όπως η άνοια). Η χρήση του Kaiku Health αντενδείκνυται σε αυτήν την περίπτωση.

7.5. Έχει το **Kaiku Health** τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες ή κινδύνους;

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, το Kaiku Health δεν έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες ή κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλειά σας.



Οι κίνδυνοι που αφορούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το **Kaiku Health** δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς. Αν υποπτεύεστε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της.

7.6. Τι πρέπει να κάνω αν παρατηρήσω κάποιο πρόβλημα με το **Kaiku Health**;

Εάν δυσκολεύεστε στη χρήση του Kaiku Health, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας για να σας βοηθήσει. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση kaikusupport@elekta.com για τεχνική υποστήριξη.

Εάν έχετε να προτείνετε βελτιώσεις για το Kaiku Health, μπορείτε να μας στείλετε σχόλια στην online [φόρμα σχολίων μας](#).

Αν παρατηρήσετε κάποιο σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με το Kaiku Health, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή και στην τοπική αρμόδια αρχή.

7.7. Τι πρέπει να κάνω αν δεν θέλω πλέον να χρησιμοποιώ το **Kaiku Health**;

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον το Kaiku Health, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας και ζητήστε τους να απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό σας στο Kaiku Health. Εάν χρησιμοποιούσατε το Kaiku Health μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, μπορείτε να την απεγκαταστήσετε μέσω της τυπικής διαδικασίας απεγκατάστασης σε iOS/Android. Το Kaiku Health δεν αποθηκεύει δεδομένα υγείας στις συσκευές σας.

7.8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του **Kaiku Health**;

Κλινικές επιδόσεις:

- Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και καθίστανται διαθέσιμα στον χρήστη που χρησιμοποιεί το Kaiku Health ως επαγγελματίας υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη αποφάσεων που σχετίζονται με θεραπείες και διαγνώσεις μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης συμπτωμάτων, σημείων ή/και υποτροπών. Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν το Kaiku Health έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, κάνουν λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα, και χρειάζονται νοσηλείες, οι οποίες μπορούν να αποτραπούν ή να περιοριστούν με την κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Επιδόσεις ασφάλειας:

- Η χρήση του Kaiku Health ή κάποιας παρόμοιας συσκευής δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.
- Η χρήση του Kaiku Health δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με εσφαλμένα υψηλή βαθμίδα ή/και εσφαλμένα χαμηλή βαθμίδα δεν δύνανται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη.
- Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με εσφαλμένη βαθμολογία δεν δύνανται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη.
- Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με οδηγίες και πληροφορίες που παρέχονται στον ασθενή δεν δύνανται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη.


Τεχνικές επιδόσεις:

- Το Kaiku Health μειώνει τα έξοδα που σχετίζονται με τη θεραπεία και περιορίζει την επιβάρυνση των ασθενών, των συγγενών τους, αλλά και του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.
- Το Kaiku Health βελτιώνει την ικανοποίηση των ασθενών.
- Το Kaiku Health βελτιώνει τον συντονισμό των θεραπευτικών διαδικασιών.
- Το Kaiku Health διασφαλίζει υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης στις αναφορές που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ασθενείς.
- Το Kaiku Health επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα τροποποιούν.
- Το Kaiku Health υποστηρίζει την εξατομίκευση και την αυτοματοποίηση της μεταπαρακολούθησης του ασθενούς βάσει των ενδείξεων του ασθενούς και του τρόπου θεραπείας του, επιτρέποντας στους ασθενείς να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια τα οποία τους αντιστοιχίζονται.

- Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους ασθενείς στο Kaiku Health και τα δεδομένα που εισάγονται από άλλα συστήματα είναι ορατά στον χρήστη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ως ασθενής, αλλά και στην ομάδα φροντίδας που του έχει αντιστοιχιστεί.
- Το Kaiku Health εξασφαλίζει τη μεταπαρακολούθηση συμπτωμάτων, βάσει συμπτωμάτων τα οποία, σύμφωνα με μοντέλα μηχανικής μάθησης που στηρίζονται σε προηγούμενες αναφορές δεδομένων, προβλέπεται ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν μετά την έναρξη τους.
- Το ιατρικό προσωπικό και οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία ως ασθενείς μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα βάσει κειμένου και συνημμένα αρχεία σε ξεχωριστές συνομιλίες για ασθενείς και για την ομάδα φροντίδας.
- Το Kaiku Health υπολογίζει τα επίπεδα σοβαρότητας των συμπτωμάτων βάσει των απαντήσεων του ασθενούς στα διάφορα ερωτηματολόγια συμπτωμάτων, ακολουθώντας μια διαμορφώσιμη λογική που στηρίζεται σε κανόνες.
- Βάσει των βαθμολογημένων συμπτωμάτων και της μονάδας του ασθενούς, το Kaiku Health παρέχει προτεραιοποιημένες ειδοποιήσεις στους επαγγελματίες υγείας, για να τους βοηθήσει να εστιάσουν την προσοχή τους στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη.
- Όπου είναι εφικτό, το Kaiku Health υπολογίζει σύνθετες βαθμολογίες για ερωτηματολόγια, βάσει των προδιαγραφών βαθμολόγησης του εκάστοτε ερωτηματολογίου.
- Το Kaiku Health εμφανίζει οδηγίες αυτοδιαχείρισης στον ασθενή βάσει της φόρμας που συμπλήρωσε και βάσει της βαθμίδας των συμπτωμάτων που ο ίδιος έχει αναφέρει.
- Το Kaiku Health εμφανίζει γενικά ενημερωτικά άρθρα σχετικά με την πάθηση του ασθενούς, με τη θεραπεία ή σχετικά με άλλα παρεμφερή θέματα στον χρήστη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ως ασθενής ανάλογα με τη μονάδα του.
- Το Kaiku Health εμφανίζει οδηγίες αυτοδιαχείρισης στον ασθενή σχετικά με συμπτώματα τα οποία, σύμφωνα με μοντέλα μηχανικής μάθησης που στηρίζονται σε προηγούμενες αναφορές δεδομένων, προβλέπεται ότι είναι πιθανό να συνεχιστούν μετά την έναρξη τους

7.9. Τι σημαίνουν τα σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έγγραφο;

Τα σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έγγραφο και η σημασία τους εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα:

Σύμβολο	Ονομασία συμβόλου	Σημασία συμβόλου
	Σήμανση CE με αναγνωριστικό κοινοποιημένου οργανισμού	Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι ένα προϊόν έχει αξιολογηθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας, και προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ. Απαιτείται για προϊόντα που παράγονται οπουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Το αναγνωριστικό κοινοποιημένου φορέα υποδεικνύει ότι η σχεδίαση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και η συμμόρφωσή του με τις Απαραίτητες Απαιτήσεις έχει ελεγχθεί από έναν Κοινοποιημένο Οργανισμό. Ο αριθμός 2797 είναι το αναγνωριστικό του Κοινοποιημένου Οργανισμού για τον όμιλο BSI Group The Netherlands B.V. Netherlands.
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, δηλαδή προϊόν που προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς.
	Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται δίπλα του αφορούν προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, αντενδείξεις, μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ή περιορισμούς στη χρήση της συσκευής.
	Κατασκευαστής	Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το σύμβολο προσδιορίζουν τον κατασκευαστή της συσκευής.
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ελβετίας	Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το σύμβολο προσδιορίζουν το όνομα και τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

7.10. Ποιες προειδοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο;

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του Kaiku Health συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο:

Ενότητα	Προειδοποίηση
3. Σχόλια	Το Kaiku Health δεν παρακολουθείται από το κλινικό προσωπικό σε πραγματικό χρόνο, αλλά προορίζεται μόνο για μη επείγουσα επικοινωνία. Σε επείγουσες καταστάσεις, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας σας ή καλέστε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
3. Σχόλια	Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, η καθοδήγηση και οι οδηγίες προσωπικής φροντίδας που παρέχει το Kaiku Health, ενδεχομένως να μην ισχύουν για εσάς. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα σας ή όσον αφορά τα συμπτώματά σας και τη διαχείρισή τους, επικοινωνήστε με την ομάδα φροντίδας σας. Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη μονάδα φροντίδας σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας τηλεφωνικά.
6. Επικοινωνία με την ομάδα φροντίδας σας	Το Kaiku Health δεν παρακολουθείται από το κλινικό προσωπικό σε πραγματικό χρόνο, αλλά προορίζεται μόνο για μη επείγουσα επικοινωνία. Σε επείγουσες καταστάσεις, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας σας ή καλέστε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη μονάδα φροντίδας σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με τη μονάδα φροντίδας τηλεφωνικά.
7.5. Έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες ή κινδύνους το Kaiku Health;	Οι κίνδυνοι που αφορούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Kaiku Health δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς. Αν υποπτεύεστε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της.

Στοιχεία επικοινωνίας



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ELEKTA SOLUTIONS AB
Hagarplan 4,
113 68 Στοκχόλμη, Σουηδία



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ελβετίας

Elekta GmbH
Grienbachstrasse 17,
6300 Zug, Ελβετία

Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης ισχύουν για το Καϊκου Health 8.0.0 και νεότερο.

Σχετικές Οδηγίες Χρήσης για τους επαγγελματίες υγείας: E065281 / 03

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των οδηγιών χρήσης σε έντυπη μορφή χωρίς χρέωση εντός 7 ημερών. Για να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίγραφο, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση customersuccess@kaikuhealth.com με τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το αρχείο που επιθυμείτε να λάβετε (δείτε την επικεφαλίδα του εγγράφου για το αναγνωριστικό του εγγράφου και τον αριθμό αναθεώρησης)
- Διεύθυνση αποστολής
- Επιθυμητή γλώσσα εγγράφου

Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αντιγράφου αυτού του εγγράφου προς εκτύπωση μέσω της διεπαφής χρήστη του Καϊκου Health ή μέσω του ιστοτόπου kaikuhealth.com.

© 2024 Elekta Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2024-04-23